


Research Biological Digital Microscope

HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡

# “モニケン2” BA210E1080

**保存画像とライブ  
画像を同時に表示！**

2画面を比較することが可能です。

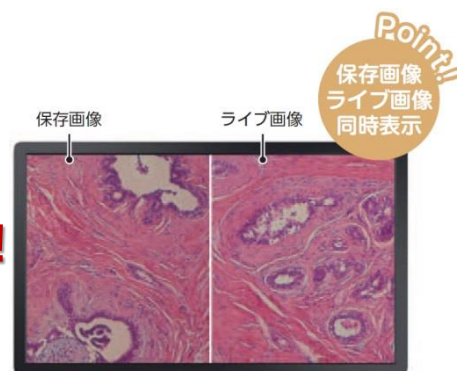

**11.6インチ  
大画面**

**オンスクリーン  
ディスプレイ**

**PC出力  
約200万画素**

**USB/HDMI  
同時出力**


**高速表示  
秒60コマ**

**SDカード  
へ保存**

軽い操作の  
ラックレス  
ステージ

腕に負担が  
かからない  
長い調節ツマミ

## オンスクリーンディスプレイとは

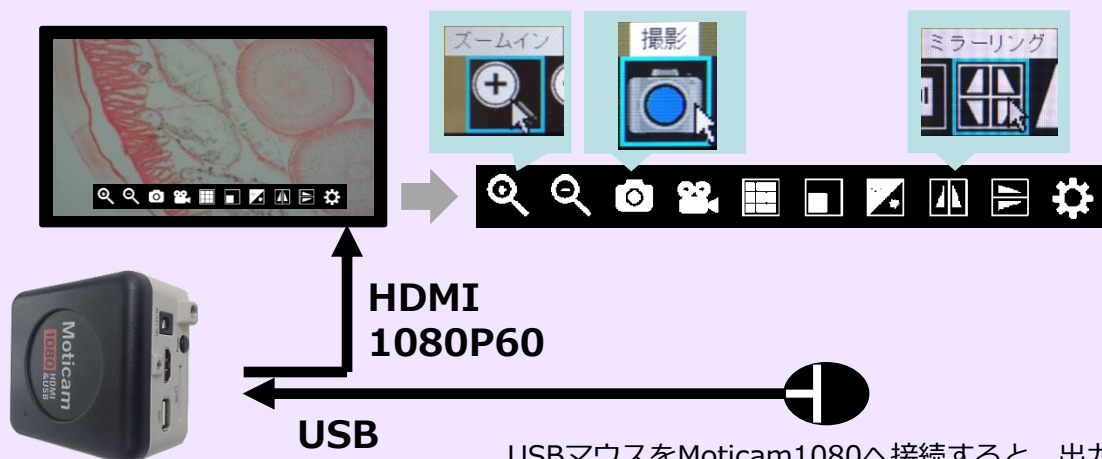

USBマウスをMoticam1080へ接続すると、出力先の外部モニタの画面上で直接操作できます。

## デジタルカメラ&モニタ部

- HDMIは、**1080P（秒60コマ）の高速表示**。
- PC経由では表示できない高速ライブ画面表示が可能。
- **USBとHDMI同時出力可能**（USBは200万画素のPC出力）。
- **オンスクリーンディスプレイ機能搭載！**  
USBにマウス接続すれば、HDMI画面上のメニュー表示で撮影／比較表示／拡大・縮小／ミラーリング／回転など、様々なカメラ機能をPCに接続しなくても制御可能。
- **保存画面とライブ画面を同時表示可能！**
- SDカードスロット搭載。静止画や動画の保存が可能。（SDHCまで対応）
- SDカード(別売)データの読み出し表示。
- HDMI端子はフルサイズを採用し、耐久性もUP。
- USBマウスが標準付属。

## 顕 微 鏡

- 対物レンズに無鉛素材を採用。鉛フリーです。
- ラックレスステージで軽い操作感覚を実現。
- ステージ調整ツマミは長いタイプを採用し、手首をつけたままで標本の移動が可能。

撮 影 例



Cat.No		115-471
形 名		“モニケン2” BA210E1080
価 格		¥298,000 +税
顕 微 鏡 部	総合倍率	40 ~ 1000X
	接眼レンズ	広視野接眼レンズ N-WF10×/20mm 両眼視度調節可能
	対物レンズ	ECプランアクロマートレンズ EC PL 4× 10× S40× 100×-oil
	鏡筒形式	三眼 ジーデントップ式 30°傾斜鏡筒 360°回転式
	焦準装置	ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛：2μm
	ステージ	ラックレス一体型XYステージ内蔵 左ハンドル スライド1枚保持
	照明装置	ハロゲン 6V/30W（連続調光式）
	大きさ・重さ	（モニタ部含む）約W280×D390×H620mm 約8Kg
	電 源	AC100-AC240V 50/60Hz
	付属品	45mmブルーフィルタ 油浸オイル 電源コード 六角レンチ 目当てゴム 鏡筒固定ツマミネジ ビニルカバー CD-R（Motic Images Plus） 拡散フィルタ 予備ランプ ACアダプタ USB/HDMIケーブル 校正用スライド USBマウス
カ メ ラ 部	格納箱	-
	デジタルカメラ	Moticam 1080
	映像出力	USB2.0/3.0 HDMI SD（SDHC 32GBまで）
	イメージセンサ	1/2.8"型CMOS
	有効画素数	SD：1920×1080（約200万画素） HDMI：1920×1080 1080P60（約200万画素） USB：1600×1200 1080P30（約200万画素）
	対応ソフト	Motic Images Plus
対応OS		Windows Vista / 7 / 8

技術的なご相談は コールセンター ☎ 0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

**株式会社 島津理化** <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支 店 東 京 TEL 03-5626-0210 大 阪 TEL 06-6375-2551  
 営 業 所 札 幌 TEL 011-758-0788 仙 台 TEL 022-380-8950  
 名 古 屋 TEL 052-571-9166 広 島 TEL 082-504-6120  
 福 岡 TEL 092-271-1418  
 海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本 社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8