

日々の検鏡をサポートする 特別キャンペーン のご案内

期間限定

日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝を込め、日々の検鏡をサポートする弊社人気モデルをお求めやすい価格でご提供する特別キャンペーンをご用意しました。

期間 2025/9/1 ~ 2026/3/31 受注分まで

快適さと効率の両立で、明るく色再現の優れた明視野観察を実現

システム生物顕微鏡

BX53LED

- 長寿命と色再現性に優れた高輝度・高演色白色 LED 光源を搭載
- ライトマネージャーにより対物レンズの切り替えごとの調光作業が不要
- ステージはワイヤー駆動によりスムーズな標本移動とラックレスを実現

キャンペーンセット名	キャンペーン型式	希望小売価格 (通常時)	希望小売価格 (キャンペーン時)
明視野 三眼鏡筒セット	BX53LED-C-TR	¥935,400	▶ ¥700,000
明視野 三眼ティルト鏡筒セット	BX53LED-C-TTR	¥1,068,400	▶ ¥800,000

※上記価格は税抜価格です

※上記各キャンペーンセットには、顕微鏡本体（LED 光源付き）、各三眼鏡筒、接眼レンズ、ステージ、コンデンサー、対物レンズ 4 倍が含まれています。

約 25%
OFF



クリアな観察とコンパクトで快適な操作性を実現する細胞チェッカー

培養顕微鏡

CKX53

- リングスリットを切り替えることなく、4X ~ 40X までの位相差観察に対応
- 長寿命 LED 光源によるクリアで広い視野の照明
- コンパクトなデザインで、クリーンベンチ内でも快適な観察を実現

キャンペーンセット名	キャンペーン型式	希望小売価格 (通常時)	希望小売価格 (キャンペーン時)
位相差スクリーニングセット	CKX53-C-PS	¥439,000	▶ ¥330,000

※上記価格は税抜価格です

※上記各キャンペーンセットには、顕微鏡本体（LED 光源、コンデンサー付き）、接眼レンズ、プレーンステージ、位相差スライダー、対物レンズ 4 倍が含まれています。

約 25%
OFF




■システム生物顕微鏡 BX53LEDの特徴




エビデント独自の高輝度高演色白色LEDを採用

LED光源は50,000時間の長寿命なだけでなく、波長特性がハロゲンランプに近く紫、シアンやピンクを鮮明に再現できる高演色性も兼ね備えています。また、100Wハロゲンランプと同等以上の明るさを持っており、高倍率での各種の観察法や最大26人用のマルチディスカッションにも対応できます。

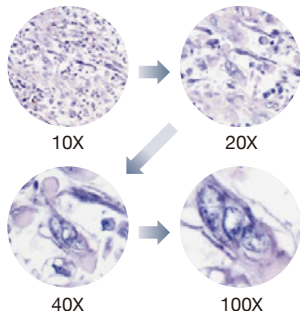

ライトマネージャーで調光不要

コード機能付きレボルバーとライトマネージャー機能により、対物レンズごとにLED光源の明るさを設定することができます。そのため、対物レンズ切り換え時に連動して設定した明るさに調光され観察を継続できます。

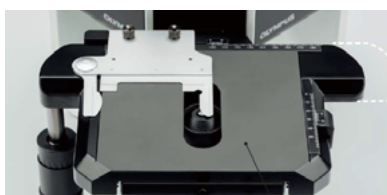

快適で使いやすいステージ


ステージはワイヤー駆動のためラックが左右に飛び出さず、標本交換など顕微鏡操作時の怪我を防止します。また、ステージ表面は耐摩耗性に優れたセラミックコートの高い耐久性により標本移動を長期間滑らかに行うことができます。

■培養顕微鏡 CKX53の特徴



迅速で効率的な細胞チェックが可能

同一のリングスリットで4X～40Xまでの位相差観察に対応し、対物の切り替えの際にリングスリットを変更する必要がなく、インキュベーターから取り出した培養細胞を素早く観察することができます。

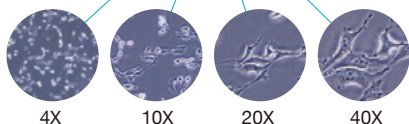

長寿命LED光源によるクリアで広い視野の照明

従来のハロゲンランプに比べて、長寿命・省エネルギーを実現したLED光源と、高性能な照明光学系により、視野数22と広い範囲にわたって照明ムラが少なく、色再現性に優れた鮮明な観察が可能です。



クリーンベンチでのスムーズな観察やサンプリング

クリーンベンチ内でもコンパクトなだけでなく、フレーム表面がUV耐性になっているため、UV滅菌中でもクリーンベンチ内に静置できます。また、フードの位置をステージ面まで下げた状態で観察が可能のため、コンタミネーションの影響を少なくします。

EvidentScientific.com

株式会社エビデント

〒192-0033 東京都八王子市高倉町67-4

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談センター 受付時間 平日 9:00～17:00

0120-58-0414 ※フリーダイヤルがご利用できない場合 03-6901-4200

お問い合わせ: <https://evidentscientific.com/ja/contact-us/>

- 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。
登録範囲は <https://evidentscientific.com/ja/legal/iso/> をご覧ください。
- 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
- 安全にお使いいただくために：顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
- このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- モニタ画像ははめ込み合成です。
- 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱販売店名

EVIDENT

OLYMPUS

V86017342508