



テクノラボエスシ社 年度末キャンペーン

2025 12/1 月 ▶ 2026 3/31 火

テクノラボエスシ社の対象製品を特別価格: **30%OFF** でご提供する
年度末キャンペーンを開催いたします。
大変お得なキャンペーンとなりますので、是非この機会をご利用ください！

また、本キャンペーンの対象製品は全てサンプル提供も可能です。
サンプルのお申し込みは当社Webサイトの依頼フォーム、
もしくはお近くの当社営業担当/販売代理店までお声掛けください。

**30%
OFF!!**


国産バイアルキット (9mm 広口)

吸着・溶出を抑制した高品質な国産バイアルを使用しており、分析トラブルの回避に貢献いたします。
また、セプタム付キャップには圧着型セプタムを採用し、セプタムの落下防止と優れた気密性を実現しています。




■ バイアルへの試料吸着比較

ガラスへの吸着性が高いことで知られるジクワットを試料として用い、
バイアルへ封入後12時間までの回収率をHPLCで測定しました。

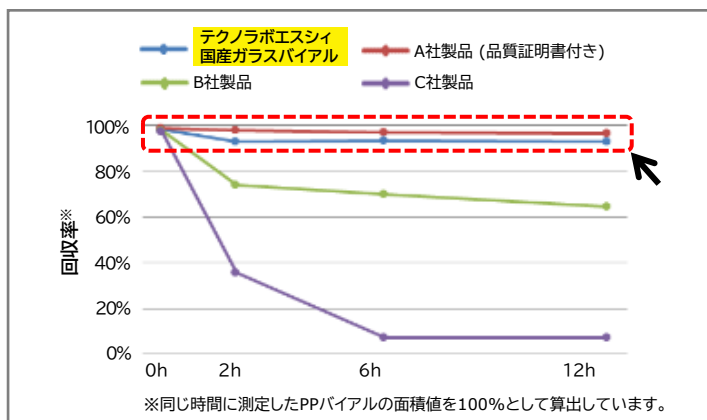

■ バイアルからのNaイオン溶出量比較

バイアルへ精製水を封入し、ガラスから溶出するNaイオンを原子吸光
で測定しました。

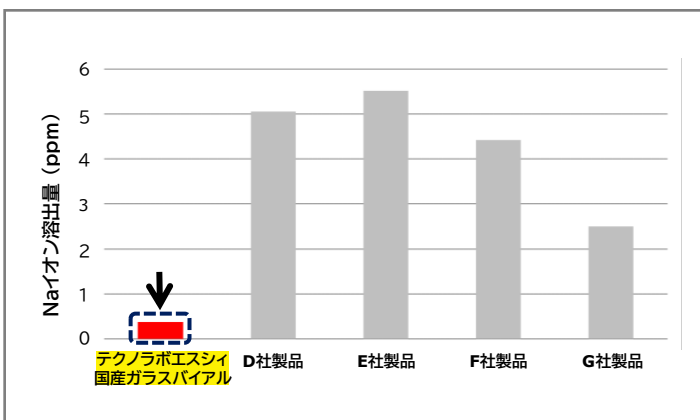

12時間後もジクワットの吸着がほとんど認められず、他社の
品質証明書付高品質ガラスバイアルと同等の低吸着性を示しています。

他社製品と比較し、国産ガラスバイアルはNaイオンの溶出が少ないこと
が分かります。

コードNo.	メーカーコード	バイアル			キャップ	セプタム		入数	希望納入価格	キャンペーン価格
		材質	色	ラベル		材質	スリット			
636-54551	AS217-HB35	ガラス	透明	無	PP	PTFE/シリコン	無	100セット	¥6,400	¥4,500
633-54561	AS217-HB36	ガラス	透明	無	PP	PTFE/シリコン	有	100セット	¥6,500	¥4,600
634-54591	AS237-HB35	ガラス	透明	有	PP	PTFE/シリコン	無	100セット	¥8,000	¥5,600
637-54601	AS237-HB36	ガラス	透明	有	PP	PTFE/シリコン	有	100セット	¥8,100	¥5,700
630-54571	AS227-HB35	ガラス	褐色	無	PP	PTFE/シリコン	無	100セット	¥6,500	¥4,600
637-54581	AS227-HB36	ガラス	褐色	無	PP	PTFE/シリコン	有	100セット	¥6,600	¥4,600
634-54611	AS247-HB35	ガラス	褐色	有	PP	PTFE/シリコン	無	100セット	¥8,200	¥5,700
631-54621	AS247-HB36	ガラス	褐色	有	PP	PTFE/シリコン	有	100セット	¥8,300	¥5,800

PFAS分析用消耗品

～PTFEフリーの実験器具～


PFASを正確に分析するには、容器や器具への吸着や溶出にも注意が必要です。
 当社ではPFAS分析に適したPTFE不使用キャップとバイアル(材質:ポリプロピレン・ポリメチルペンテン・ほう珪酸ガラス)をラインアップしています。また、環境省の「土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(溶出量試験)」に適合する直径90 mmのPTFE不使用のメンブレンフィルターも取り扱っております。

セプタム付スクリューキャップ (PTFE 不使用)



PEEK/シリコン

- ・新たにPEEK/シリコンを追加
- ・ご要望の多いスリット付もご用意
- ・複数回のインジェクション可能

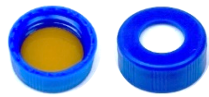

ポリイミド/シリコン

- ・2層構造により複数回のインジェクション可能



アルミパッキン

- ・単回のインジェクション用
- ・GPC分析にも



ポリエチレン一体型

- ・単回のインジェクション用
- ・ハイクスパキャップ


コードNo.	メーカーコード	キャップ材質	キャップ色	セプタム材質	スリット	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
636-59931	CE121-GP00	PP	緑	PEEK/シリコン	無	100個	¥6,400	¥4,500
633-59941	CE121-GP10	PP	緑	PEEK/シリコン	有	100個	¥6,600	¥4,600
635-55501	CF121-BP00	PP	青	ポリイミド/シリコン	無	100個	¥5,800	¥4,100
630-37091	CL121-BA00	PP	青	アルミ	無	100個	¥8,200	¥5,700
632-42681	CF122-C100	PE	透明	PE(一体型)	無	100個	¥2,000	¥1,400

スクリューバイアル (9mm 広口)



コードNo.	メーカーコード	材質	色	ラベル	容量	その他仕様	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
623-01911	MF127-1013	PMP	透明	無	0.1 mL	内部テーパー形状	100個	¥5,800	¥4,100
627-01931	ML125-3012	PP	透明	無	0.3 mL	内部テーパー形状	100個	¥4,300	¥3,000
624-01941	ML125-6012	PP	透明	無	0.7 mL	-	100個	¥4,300	¥3,000
629-02111	VL125-3000	PP	透明	無	1.5 mL	-	100個	¥4,900	¥3,400
638-56451	MT123-3011	ガラス	透明	有	0.3 mL	インサート一体型	100個	¥16,400	¥11,500
621-01831	VS121-3000	ガラス	透明	無	1.5 mL	低アルカリガラス	100個	¥3,400	¥2,400
625-01851	VS123-3000	ガラス	透明	有	1.5 mL	低アルカリガラス	100個	¥5,000	¥3,500

セプタム付きスナップキャップ・バイアル単品

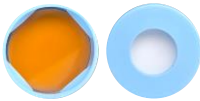

ポリイミド/シリコン

・2層構造により複数回の
インジェクション可能



ポリエチレン一体型

・単回のインジェクション用
・ハイコスパキャップ



<セプタム付きスナップキャップ（広口）>

コードNo.	メーカーコード	キャップ材質	キャップ色	セプタム材質	スリット	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
635-62211	CL342-BP00	PE	青(淡青)	ポリイミド/シリコン	無	100個	¥12,800	¥9,000
623-03091	CF342-C100	PE	透明	PE(一体型)	無	100個	¥1,700	¥1,200

<スナップバイアル（広口）>

コードNo.	メーカーコード	材質	色	ラベル	容量	その他仕様	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
625-03291	MF347-1013	PMP	透明	無	0.1mL	内部テーパ形状	100個	¥5,900	¥4,100
628-03301	ML345-3012	PP	透明	無	0.3mL	内部テーパ形状	100個	¥3,800	¥2,700
628-03281	MF345-6002	PP	透明	無	0.75mL	高回収型	100個	¥3,800	¥2,700
635-56721	VT345-1000	PP	透明	無	1.0mL	-	100個	¥4,100	¥2,900
635-37161	VF345-3000	PP	透明	無	1.5mL	-	100個	¥5,000	¥3,500
639-56501	MT343-3011	ガラス	透明	有	0.3mL	インサート一体型	100個	¥22,000	¥15,400
624-03381	VS341-3000	ガラス	透明	無	1.5mL	低アルカリガラス	100個	¥3,400	¥2,400

メンブレンフィルター（PTFE不使用）

ろ過用として広く使用いただけるメンブレンフィルターです。
各種材質を取り揃えており、用途に合わせてご選択いただけます。



材質	直径	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
CA 親水性 水溶液全般/低タンパク吸着	25mm	0.22μm	639-54161	TLMFCA25022	200枚	¥19,800	¥13,900
		0.45μm	636-54171	TLMFCA25045	200枚	¥19,800	¥13,900
	47mm	0.22μm	633-54181	TLMFCA47022	200枚	¥24,600	¥17,200
		0.45μm	630-54191	TLMFCA47045	200枚	¥24,600	¥17,200
	90mm	0.22μm	635-57701	TLMFCA90022	50枚	¥17,000	¥11,900
		0.45μm	632-57711	TLMFCA90045	50枚	¥17,000	¥11,900
PES 親水性 イオンクロマトグラフィー用	25mm	0.22μm	633-54201	TLMFES25022	200枚	¥15,800	¥11,100
		0.45μm	630-54211	TLMFES25045	200枚	¥15,800	¥11,100
	47mm	0.22μm	637-54221	TLMFES47022	200枚	¥27,300	¥19,100
		0.45μm	634-54231	TLMFES47045	200枚	¥27,300	¥19,100
	90mm	0.22μm	639-57721	TLMFES90022	50枚	¥20,000	¥14,000
		0.45μm	636-57731	TLMFES90045	50枚	¥20,000	¥14,000
MCE 親水性 水溶液全般/不活性	25mm	0.22μm	631-54241	TLMFMC25022	200枚	¥18,900	¥13,200
		0.45μm	638-54251	TLMFMC25045	200枚	¥18,900	¥13,200
	47mm	0.22μm	635-54261	TLMFMC47022	200枚	¥24,600	¥17,200
		0.45μm	632-54271	TLMFMC47045	200枚	¥24,600	¥17,200
	90mm	0.22μm	633-57741	TLMFMC90022	50枚	¥14,000	¥9,800
		0.45μm	630-57751	TLMFMC90045	50枚	¥14,000	¥9,800

フィルターバイアル

～ シリンジレスのオールインワン構造 ～

フィルターとバイアルが一体となった「フィルターバイアル」です。
ワンプッシュでサンプルろ過後、そのままオートサンプラーにセットすることが可能で、シームレスな分析を実現します。また、シリンジやシリンジフィルターが不要なため、廃棄物や保管スペースを削減できます。
12サンプルを一度にろ過処理できるプレス機の取り扱いもございます。

<特長>

- 全4種のフィルター材質をラインアップ
- ワンプッシュで容易にろ過可能
- 各社のオートサンプラーに互換性あり



PES




NYLON



親水性PTFE



親水性PVDF

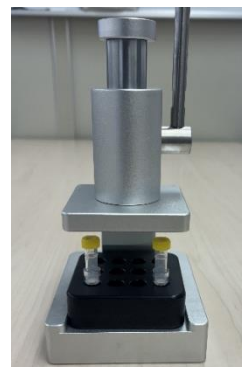

プレス機

<簡単2ステップ！ご使用方法>



サンプルを充填する



プランジャーを
ゆっくり押し下げる



ろ過完了！
そのままオートサンプラーへ

仕様

- サイズ : 12×32 mm
- バイアル材質 : ポリプロピレン
- キャップ材質 : ポリプロピレン
- セブタム材質 : PTFE/シリコン (クロススリット付)
- 最大サンプル量 : 480 μ L
- デッドボリウム : 30 μ L

フィルター材質	孔径	コードNo.	メーカーコード	入数	希望納入価格	キャンペーン価格
PES 親水性 イオンクロマトグラフィー用	0.22 μ m	633-57481	TLFVES022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	630-57491	TLFVES045	100セット	¥33,000	¥23,100
NYLON 親水性 水溶液・一部有機溶媒用 (強酸・強アルカリには不適)	0.22 μ m	633-57501	TLFVNY022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	630-57511	TLFVNY045	100セット	¥33,000	¥23,100
親水性PTFE 親水性 水溶液・有機溶媒 両用	0.22 μ m	631-57541	TLFVPTH022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	638-57551	TLFVPTH045	100セット	¥33,000	¥23,100
親水性PVDF 親水性 水溶液・有機溶媒 両用	0.22 μ m	639-57581	TLFVVDH022	100セット	¥33,000	¥23,100
	0.45 μ m	636-57591	TLFVVDH045	100セット	¥33,000	¥23,100

コードNo.	メーカーコード	品名	入数	希望納入価格
639-61751	TLFV-PS12	フィルターバイアル用プレス機(12本立て)	1台	¥93,000

※プレス機はキャンペーン対象外となります。

- ・ 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の販売代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。
- ・ 掲載価格には消費税等が含まれておりません。

発売元



テクノラボエスシ株式会社

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-16-15

Tel.06-6453-2012 Fax.06-6453-2013

販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

●北海道営業所 ●東北営業所 ●筑波営業所 ●横浜営業所
●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>