

VAPLOCK 実験室環境改善システム

溶媒換気フィルターキャンペーン



- 溶媒換気フィルター (5個入)
品番: 12019-81(EF-100V)

キャンペーン期間

2025年**12月1日**～ 2026年**2月27日**


希望小売価格
¥49,000-

キャンペーン価格

¥39,000-

残予算でHPLC廃液のリスク対策をしませんか？

VAPLOCK 廃液キャップ構成図

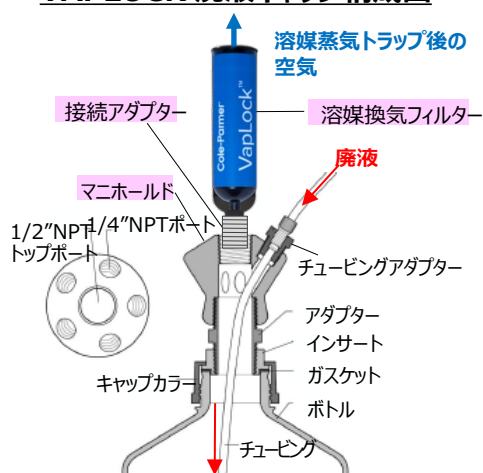

- ・実験室に溶媒の臭いがこもっていて健康に不安・・・
- ・労働安全衛生法に対応しなければいけない・・・
- ・廃液ボトルにアルミホイルを被せているだけで大丈夫？

有機溶媒によるリスク低減措置を支援

VAPLOCK廃液キャップは、廃液ボトルに取り付けるマニホールドです。廃液ボトルの出口に取り付けられた活性炭フィルターによって、廃液ボトルからの有害蒸気をトラップすることで、実験室の環境悪化を抑え作業者を守ります。

現在ご使用中のポリタンクへも取り付け可能です。※ ポリタンク口内径38mm以上

・ポリタンク用 廃液キャップ構成例

1/16"外径チューブ、5/16"内径チューブ用アダプター付き
ポリタンクキャップ穴あけ加工費含む



EF-100V



PL-101



FA-005



PM-605



AC-150



AB-115



ポリタンクキャップ穴あけ

型番	製品	入数	数量
12031-28 (PM-605)	パネルマウントマニホールド (5ポート) カムロックタイプ	1	1
12019-87 (FA-005)	フィルター用アダプター	1	1
12019-81 (EF-100V)	溶媒換気フィルター	5	1
12020-11 (AC-150)	1/16"ODチューブ用アダプター	1	1
12020-21 (AB-115X)	5/16"IDチューブ用アダプター	10	1
12020-44 (PL-101X)	プラグ	10	1

希望小売価格
¥109,940-

キャンペーン価格

¥99,940-

溶媒別の推奨カートリッジ交換時期

使用可能時間の目安です。使用環境によって適宜判断の上、早めに新しいものに交換することをお勧めします。



フィルターの効果が薄れると、蒸気をトラップできず実験室内に放出されてしまいます、作業者の化学物質による **リスクを低減**させるには、**定期的なフィルター交換**が必要になります。

VAPLOCK 廃液スターターキット **ガロン瓶、デュラン瓶への取り付けに！**




VAPLOCK™ 廃液スターターキットには、溶媒換気フィルターをはじめ、ボトルとチュービング以外の必要な部品がすべて含まれています。複数種類のチュービング接続アダプターが付属しているため、さまざまな径のチュービングを接続できます。

廃液スターターキットには、以下のパーツが含まれています。

- 10ポートマニホールドキャップ
- 1/2" NPTポート x1, 1/4" NPTポート x3, 1/4-28ポート x6
- 溶媒換気フィルター x1個
- カラーインジケーター x1個
- フィルター用アダプター 1/2" NPTポート用 x1個
- プラグ 1/2" NPTポート x1個
- プラグ 1/4" NPTポート x3個
- プラグ 1/4-28 ポート x6個
- 1/4-28ポート フィッティング 2.2mm OD チュービング用 x2個
- 1/4-28ポート フィッティング 2.5mm OD チュービング用 x1個
- 1/4-28ポート フィッティング 1/8" OD チュービング用 x3個
- 1/4-28ポート フィッティング 1/16" OD チュービング用 x2個
- 1/4" NPTポート バードアダプター 1/4" ID チュービング用 x3個
- 1/4" NPTポート バードアダプター 1/8" ID チュービング用 x1個
- 1/4" NPTポート バードアダプター 3/16" ID チュービング用 x1個
- 1/4" NPTポート バードアダプター 3/8" ID チュービング用 x1個
- バードYコネクター 1/4" x1個
- 1/8" OD チュービング 1.5m x1本

品番	規格	マニホールド材質	価格
12018-68	国内ガロン瓶用（規格 GL-38-400）	PP	¥71,000
12018-69	国内ガロン瓶用（規格 GL-38-400）	PTFE	¥85,000
12018-56	GL-38 用（規格 GL-38）	PP	¥81,000
12018-57	GL-38 用（規格 GL-38）	PTFE	¥109,000
12018-74	GL-45 用（規格 GL-45）	PP	¥84,000
12018-75	GL-45 用（規格 GL-45）	PTFE	¥97,000

VAPLOCK 実験室環境改善システム

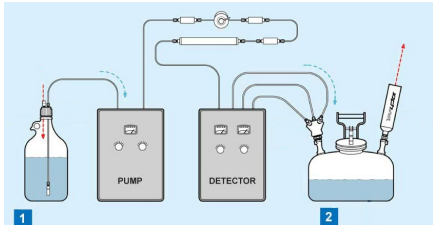

① 溶媒リザーバー向け製品



② 廃液向け製品



エムエス機器株式会社

□ 東京 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地
TEL(03)3235-0661(代) / FAX(03)3235-0669
□ 大阪 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
TEL(06)6396-0501(代) / FAX(06)6396-0508



MS
CM009



JQA-QMA12892
大阪・東京
JQA-EM4217
大阪

www.technosaurus.co.jp

© 2025 M&S Instruments Inc.
本リーフレットに掲載された内容の無断複製・転載を禁じます。

取扱販売店

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
●本カタログに表示の価格には、消費税は含まれておりません。