

この品質で、
7,000円は
スゴイ!!

しかも、
Made in JAPAN!!

島津**150**周年&島津ジーエルシー**30**周年

Wアニバーサリーキャンペーン

第2弾：2025年7月1日（火）～2025年9月30日（火）

今がお得!!
30% OFF

LC、LC-MS分析での島津の**ファーストチョイス**バイアル!

Shim-vial™ S glass



- ◎ コストパフォーマンスに優れたスタンダードユースに最適なバイアル
- ◎ ppb ~ ppm オーダーの高感度分析にも
- ◎ 製造工程内の全数検査と品質証明による高い信頼性

キャンペーンコード **150ANV**

ご注文の際は、上記コードをご明示のうえご注文ください。
ご明示の無い場合はキャンペーン価格が適用されません
のでご注意ください。



キャンペーン価格表（品質証明書付き、100本入り）

容量	セプタム材質	スリット	ガラス色	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
1.5 mL	PTFE/Silicone	無し	透明	227-34500-51	¥10,000	¥7,000
			褐色	227-34500-53	¥10,000	¥7,000
		有り	透明	227-34500-52	¥10,000	¥7,000
			褐色	227-34500-54	¥10,000	¥7,000
	Silicone	無し	透明	227-34500-55	¥10,000	¥7,000

製品情報はこちら




ガラスバイアル内表面からのアルカリ溶出をご存じですか？

ガラス容器中に長期保管した薬剤にガラス由来の異物が確認されることがあります。

これを低減させるための低アルカリ化は、処理によっては表面皮膜の劣化やガラス表面に残存物が発生する恐れがあります。

例えば、主要な不活性処理であるシリラン化処理を施したバイアルは、イオンの吸着を抑制できる一方、疎水的吸着が増大し、別の吸着リスクを発生させます。Shim-vial glass シリーズでは、特殊な処理によってナトリウムの溶出を抑えており、サンプルの吸着や分解・反応などを抑制することが期待でき、長期保管しない分析用バイアルにおいても有効です。

ガラス容器からのアルカリ溶出と吸着のメカニズム

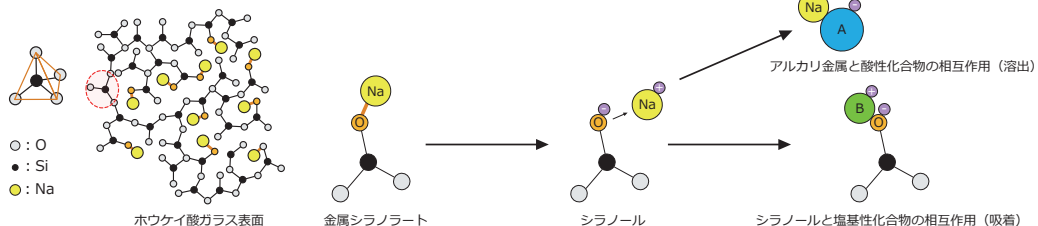

分析結果の信頼性を高めるソリューション

第1弾 (4～6月)

・低吸着

- ・低濃度域の面積値再現性
- ・サンプル分解抑制
- ・バイアル内 pH 上昇抑制



Shim-vial™ H glass

第2弾 (7～9月)

・吸着抑制

- ・吸着抑制とスタンダードコースを両立



Shim-vial™ S glass

あらゆる分析系で、確かな分析値を
～ keep the TRUTH ～

・移動相中の 夾雑成分の除去

(LC システムの最上流で)

第4弾 (2026年1～3月)

?



・低吸着

(ペプチド・塩基性化合物も)

第3弾 (10～12月)

バイアル
認識が
変わるかも!

セミナー実施中

LC、LC/MS 分析結果の信頼性を高める

バイアル選択の基礎知識

参加無料 | セミナー開催ディスカウントクーポンあり



セミナー一部内容も
(YouTube)

便利コンテンツのご紹介

簡易消耗品選定ツール「GLC Assist」



選定するにも種類が多くて…、そんなお悩みには簡易消耗品選定ツール「GLC Assist」がオススメです。

質問に答える形式で条件を選択していくと、その条件に合った製品を紹介してくれるスグレモノです！
選定の参考などに是非ご活用ください。



分析に合った
バイアルが
見つかるかも!

「GLC Assist」はこちら



株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。