

Lab Supply ラボサプライ

2026年 夏号

お得に選ぼう！ブラボーサプライ！！



 2-1 
Bravo!!!

SALE

特別ノベルティ企画 話題のカプセルトイが条件達成で手に入る！

島津製作所監修カプセルトイ

『手のひら分析ラボ』進呈!!



特集

HPLC カラム C18 では分離が難しい異性体各種の分離に!!

Biphenyl系・PFPP系カラム **20% OFF**

逆相では保持が困難な場合に!!

HILIC系カラム **20% OFF**

PFAS分析 消耗品のご紹介 ほか

ただ今メルマガ登録いただいた方に、
エコバッグ & 安全反射バンド進呈中！

数に限りがございます。なくなり次第ノベルティ配布終了となります。



使い勝手のいいサイズ感！ ※イメージ
ラボサプライ柄が大好評！

詳しくは当社ホームページまで！

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

キャンペーン

話題沸騰!

特別ノベルティ企画

条件達成で、
島津製作所監修カプセルトイ
『手のひら分析ラボ』が

手に入る!!



2026年5月に発売され大きな話題を呼んだ島津製作所監修の
カプセルトイ、『手のひら分析ラボ』はご存知ですか？
細部までこだわったギミックで大変好評をいただいております！
本キャンペーンで条件達成された方に、この『手のひら分析ラボ』を
プレゼントいたします！（先着480個限定）



進呈条件

- A** ● メソッド開発用カラムキット
Shim-pack MSS Kit (6本セット) 1キットご購入で、
カプセルトイ3つ **進呈**

- B** ● 移動相クリーニング機能付きサククションフィルタ
GLC Suction Filter 3
● 固相抽出製品
SHIMSEN Styra SPE 同一P/N5点同時ご購入で、
カプセルトイ1つ **進呈**
● GC、GC-MS用高品質ガラスバイアル
Shim-vial for GC, GC-MS

- C** ● TOC計向けスクリーバイアル
Shimadzu 40mlバイアル LE 同一P/N10点同時ご購入で、
カプセルトイ1つ **進呈**
● イオンクロマトグラフ用PPバイアル
GLC-IVS-100

※ノベルティはランダムでのお渡しとなります。ご指定や、交換はお受けいたしかねますので予めご了承ください。
※ノベルティは数に限りがあります。なくなり次第の終了となります。
※対象P/Nは当社ウェブサイトにてご確認ください。
※キャンペーンコードの漏れや適用条件を満たさない場合の進呈はできかねます。

■キャンペーン期間
2026年7月1日(水)から
2026年9月30日(水)まで

■キャンペーンコード
CAMP
※ご発注の際は、キャンペーンコードを
必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用
となりませんのでご注意ください。

■価格表について
キャンペーン対象製品が確認いただけ
る価格表は島津ジーエルシーウェブサイ
ト内の本キャンペーン特設ページでダウ
ンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告な
く改訂することがございます。

■納期について
在庫状況や発注状況により通常よりもお
届けまでにお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■キャンペーンページ
こちらの二次元コードか
らキャンペーンページに
アクセス可能です。


新規メルマガ
会員様募集中!



気づいたときには遅かった…
そんな経験はありませんか？

メルマガ登録すると、

- キャンペーン情報の見逃しを防止!**
キャンペーン情報を自ら探しに行く手間を減らすだけでなく、
メールアナウンスで見逃しも防止します。
- 最新コンテンツなどの情報も届く!**
新製品情報や便利なハウツーコンテンツのご紹介、セミナーの
ご案内なども配信。


ご登録特典
進呈中!

月2回程度の配信です! 詳しくは当社ホームページまで!


キャンペーンページ

特集！ HPLCカラム C18 では分離が難しい異性体各種の分離に！！ Biphenyl系・PFPP系カラム

Phenyl カラム(Biphenyl) によるビタミンD3代謝物の異性体分離

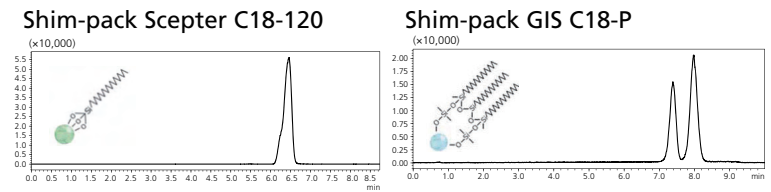

C18カラムでは分離が困難

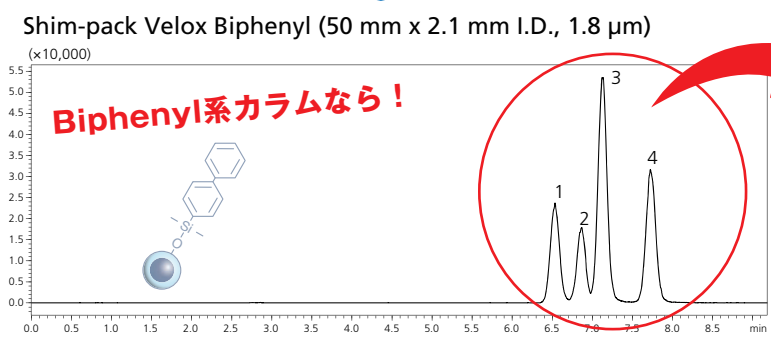

Biphenyl系カラムなら！

Shim-pack Velox Biphenyl を用いたPTAD 誘導体化VitaminD₃ 代謝物の分析

構造式が似ている化合物でも分離可能！

<p>1</p> <p>3-epi-25(OH)D₃-PTAD (6R-isomer)</p>	<p>2</p> <p>25(OH)D₃-PTAD (6R-isomer)</p>
<p>3</p> <p>25(OH)D₃-PTAD (6S-isomer)</p>	<p>4</p> <p>3-epi-25(OH)D₃-PTAD (6S-isomer)</p>

Phenyl系カラムやPFPP系カラムが得意とする異性体分離について

異性体		例	解決策
構造異性体 分子式は同じで分子の構造が異なる化合物	官能基異性体	アルコールとエーテル、アルデヒドとケトンなど官能基同士が異なる	・基本的に一般的なC18カラムなどで分析可
	位置異性体	<i>o</i> -Cresol, <i>m</i> -Cresol, <i>p</i> -Cresol など骨格に対して官能基の付いている位置が異なる	・高機能なC18カラム ・ Phenyl系カラム ・ PFPP系カラム など
立体異性体 分子式と分子の構造が同じで、分子の3次元的な立体配置が異なる	幾何異性体	<i>cis/trans</i> 異性体など	・ Phenyl系カラム (特にBiphenyl) ・ PFPP系カラム など
	光学異性体	ジアステレオマー エナンチオマー (<i>L</i> -アミノ酸、 <i>D</i> -アミノ酸 など)	

※本表に示す情報は全てのアプリケーションを代表および分析結果を保証するものとは限りません。

キャンペーン価格 (一部抜粋)

固定相	品名	メーカー	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
PFPP系	Shim-pack Scepter PFPP-120	島津製作所	227-31061-05	¥63,000	¥50,400
	Shim-pack Scepter Claris PFPP-120 ^(※)		227-31214-15	¥100,000	¥80,000
	Shim-pack GIST PFPP		227-30867-07	¥63,000	¥50,400
	Shim-pack Velox PFPP		227-32024-03	¥136,000	¥108,800
Biphenyl系	Shim-pack Velox Biphenyl		227-32018-03	¥136,000	¥108,800

※Scepter Claris はバイオイナートコーティングカラムです。

今がお得!!
 キャンペーン利用なら
 対象製品が希望小売価格から
20%OFF

■**キャンペーン期間**
 2026年7月1日(水)から
 2026年9月30日(水)まで

■**キャンペーンコード**
CAMP
 ※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
 ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■**価格表について**
 キャンペーン対象製品が確認いただけ
 る価格表は島津ジーエルシーウェブサ
 イト内の本キャンペーン特設ページでダ
 ウンロード可能です。
 また、掲載製品の希望小売価格は予告な
 く改訂することがございます。

■**納期について**
 在庫状況や発注状況により通常よりもお
 届けまでにお時間をいただく場合がございます。
 あらかじめご了承ください。

■**キャンペーンページ**
 こちらの二次元コードか
 らキャンペーンページに
 アクセス可能です。




キャンペーン

特集！！ 逆相では保持が困難な場合に！！ HILIC系カラム

出陣の準備は完了！！


一般的なC18カラムで保持が小さくて困る…、そんな時の3つのアプローチ

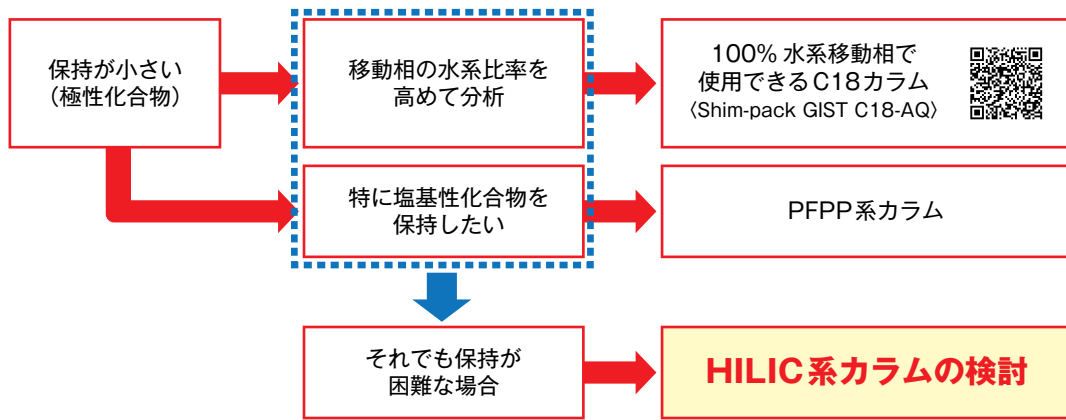

お気軽に
ご相談ください！

過去にHILICカラムをご使用されてうまくいかなかった経験がある方へ

島津ジーエルシーでは様々なタイプのHILIC系カラムをお取り扱いしております！
お客様の条件に合った解決策をご提示できるかもしれません。

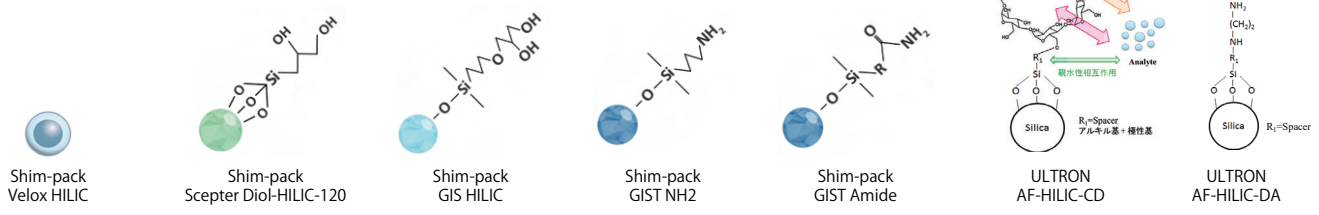

キャンペーン価格 (一部抜粋)

固定相	品名	メーカー	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
HILIC系	Shim-pack Scepter Diol-HILIC-120	島津製作所	227-31051-05	¥63,000	¥50,400
	Shim-pack Scepter Claris Diol-HILIC-120 ^(※)		227-31213-15	¥100,000	¥80,000
	Shim-pack GIS HILIC		227-30641-06	¥63,000	¥50,400
	Shim-pack GIST Amide		227-30827-06	¥63,000	¥50,400
	Shim-pack GIST NH2		227-30302-06	¥63,000	¥50,400
	ULTRON AF-HILIC-DA	信和化工	LCC-13031-177	¥59,000	¥47,200
	ULTRON AF-HILIC-CD		LCC-13131-177	¥120,000	¥96,000

※Scepter Claris はバイオイナートコーティングカラムです。

今がお得!!
キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から
20%OFF

レンチ等を用いずに締め付け可能！専用ツールを使って手締めでも高耐圧に！

	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
フィッティング	10	PK-120BLKX	¥19,000	¥13,300
手締めツール	1	P-291	¥11,000	¥7,700

一緒にいかがですか？
【耐圧】
12,000 psi
83 MPa

今がお得!!
キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から
30%OFF

■キャンペーン期間

2026年7月1日(水)から
2026年9月30日(水)まで

■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを
必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用
となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただけ
る価格表は島津ジーエルシーウェブサイト
内の本キャンペーン特設ページでダウ
ンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告な
く改訂することがございます。

■納期について

在庫状況や発注状況により通常よりもお
届けまでにお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードから
キャンペーンページに
アクセス可能です。



PFAS 分析消耗品のご紹介

PFAS は環境中のあらゆるところに潜んでおり、分析に使用する消耗品もコンタミネーションの要因になり得ます。PFAS 分析では、PFAS の発生源となるような材料を使用していない消耗品を選択することで、分析精度の向上につながります。

PFAS 分析に最適な消耗品ソリューション

カラム



各種 PFAS 規制に対応したカラム

ISO 21675 Shim-pack Scepter C18-120
EPA 1633 Shim-pack GIST-HP C18
水道法 Shim-pack Scepter C18-120

特長

- 豊富なサイズラインナップ
- PFAS 分析の豊富な実績
- 幅広いマトリクスへの対応

バイアル&キャップ



推奨バイアル

Shim-vial H glass 1.5 mL、0.15 mL
Shim-vial S glass 1.5 mL
Shim-vial PP for PFAS 1.5 mL
PEEK/Silicone septum

特長

- サンプルの吸着を抑制
- ガラス / ポリプロピレンの素材選択が可能
- 予算に応じたバイアルセレクション

お客様の声
ブリードが軽減しました！

固相抽出 (SPE)



各種 PFAS 規制に対応した SPE

EPA 1633 SHIMSEN Styra WAX/GCB
SHIMSEN Styra WAX
水道法 SHIMSEN Styra WAX

特長

- 豊富なサイズラインナップ
- 高いサンプル回収率
- 良好なロット間再現性

コスト見直しに最適！

他社メーカー製品

認証標準物質 (CRM)



特長

- PFOS / PFOA / PFHxS 対応
- 直鎖体のみ含有
- 誤差最小で時短・低コストが可能 (Restek 社製品)

ラボセーフティグッズ



特長

- セーフティキャップ等を展開
- PEEK 製で高い安定性・耐久性
- 導入に便利なスターターキットも用意 (S.C.A.T 社製品)

PFAS関連製品特設ウェブページで製品詳細をご確認いただけます! ▶▶



島津ジーエルシー公式

YouTube チャンネルご登録のススメ

——— チャンネル登録で、見たい時にすぐ見つかる ———



チャンネル登録【している】と!

お気に入りのチャンネルがリスト化され
見たい動画が探しやすい!
新着動画の通知設定で見逃し防止も!

チャンネル登録

クリック

チャンネル登録済



プラスで通知設定も!

登録後、通知を「ON」にして「すべて」に設定すると
最新動画の公開通知が届き見逃しを防げます!

1分らずで完結!

登録ボタンを押すだけ!

今すぐ島津ジーエルシー YouTube チャンネルをチェック!

島津ジーエルシー YouTube



新製品のご紹介

GC 不活性インサート

Xtra イナートライナー

- ◎ 農薬などの難しいサンプルにも。
- ◎ アジレント社やサーモフィッシャー社製 GC (一部) でも使用可能! (長さ 78.5 mm × 外径 6.3 mm)
※ 島津製作所製 Nexis GC-2060 のマルチモード注入ユニット (MMI) 用です。
島津製作所の他の装置や注入ユニットにはご使用いただけません。
- ◎ 5 本入り。

★ 取り外しには『インサートリムーバールール』が便利です!



製品ページはこちら



全多孔性シリカ C30 カラム

Shim-pack SR-C30

- ◎ シリカゲル基材にトリアコンチル (C30) 基を結合した逆相カラム。
- ◎ カロテノイド、アルデヒド等の一般的な C18 カラムでは分離が難しい異性体分離に最適。
- ◎ 環境分析の法規制対応から研究用途まで、幅広い分析の信頼性と効率の改善に貢献。



製品ページはこちら



シリンジフィルタ

イオンクロマトグラフ用シリンジフィルタ

- ◎ 無機イオンによる汚染が少ない。
- ◎ 孔径は 0.45 と 0.2μm を採用。
- ◎ 目詰まり状況に応じて複数フィルターを連結可能。



製品ページはこちら



製品の P/N・仕様等の詳細は、島津ジーエルシーサイトをご確認ください!

水質基準項目の分析にコストダウンを検討してみませんか?



コストパフォーマンスが強みの
製品も多数取り揃えております!

価格高騰でお悩みの方など、
お気軽にご相談ください!

固相抽出製品

SHIMSEN Styra SPE

(カプセルトイ進呈対象製品)



価格情報・ラインナップはこちら



シリンジフィルタ

TORAST Disc

今後も価格維持を目指します!



価格情報・ラインナップはこちら



価格例

製品名	仕様	P/N	希望小売価格 (税抜)
SHIMSEN Styra HLB-E	265mg, コマ型, 50 個入り	380-00855-17	58,000 円
SHIMSEN Styra WAX-E	225mg, コマ型, 50 個入り	380-00852-10	54,000 円
メンブレン材質	仕様	P/N	希望小売価格 (税抜)
ポリエーテルスルホン (PES)	直径 25mm, 孔径 0.45um, 100 個入り	GLCTD-PES2545	14,500 円
親水性 PTFE	直径 25mm, 孔径 0.45um, 100 個入り	GLCTD-HPTFE2545	15,000 円
親水性混合セルロースエステル (MCE)	直径 25mm, 孔径 0.45um, 100 個入り	GLCTD-MCE2545	8,100 円

注目製品!

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

本文に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していません。
掲載価格は 2026 年 6 月発行時点のものです。

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。