

抗S100A4タンパク質抗体



S100A4タンパク質を高感度に測定できます！


抗ヒトS100A4 マウスモノクローナル抗体

本抗体は、WBおよび抗原固相ELISAにて極めて高い特異性を示し、極微量でも正確に測れる高感度検出が可能であることを特徴としています。近年、S100A4は疾患研究や創薬研究における測定対象として注目されており、国内外で関連研究が進められています。

S100A4は、細胞の運動性、浸潤、血管新生を調節するカルシウム結合タンパク質です。

炎症性サイトカインの産生を促進し、炎症性細胞の遊走を誘導することで病態形成に関与すると考えられており、疾患活動性や治療反応性の評価におけるバイオマーカーとしての有用性が検討されています。


弊社抗体とHRP標識抗体を固相抗体と標識抗体のセットとして使用

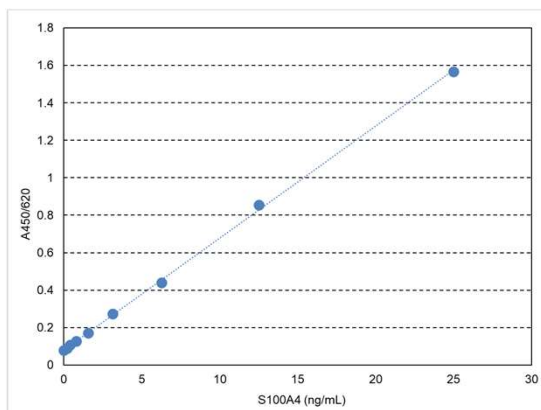

他社Sandwich ELISAキットに比べて高感度！

	PPMX	A社 ELISA Kit
検量線範囲	0.19-25ng/mL	0.378-24ng/mL
最低検出感度	0.24ng/mL	0.282ng/mL
発色時間	30min	10-20min
添加回収試験	91~102%	84~113%

2次抗体：HRP-2H4 0.1mg/mL

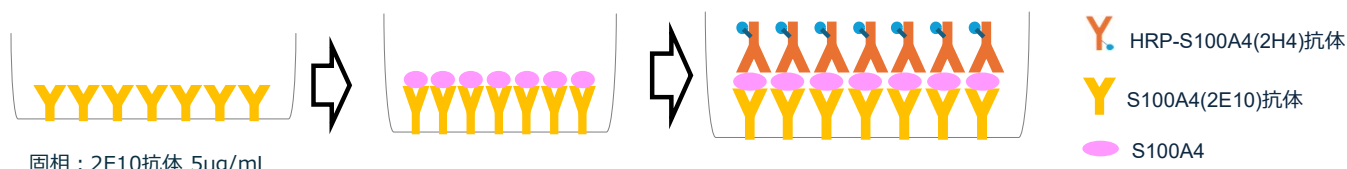

固相：2E10抗体 5μg/mL

製品コード	抗体製品名	容量	濃度	希望納入価格
PP-2E10-0C	抗ヒトS100A4 マウスモノクローナル抗体 Anti human S100A4 mouse monoclonal antibody	100μL	1mg/mL	¥78,000.
PP-2H4-0C	HRP標識 抗ヒトS100A4 マウスモノクローナル抗体 HRP conjugated Anti human S100A4 mouse monoclonal antibody	50μL	0.5mg/mL	¥58,000.

株式会社ペルセウスプロテオミクス

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町30番1号 A.i. Nihombashi EAST 3F

TEL：03-6264-8268 FAX：03-6264-8268

ホームページ：www.ppmx.com お問い合わせ：<https://www.ppmx.com/contact/>

[2E10データシート](#)

[2H4データシート](#)

